



Veneers befestigen.
So einfach. So schön.

Vitique
Permanente Zemente





Vitique – Veneers befestigen. So einfach. So schön.

Geringe Schichtstärken? **Kein Problem.**

Dank patentierter Monomerformel bietet Vitique die optimale Konsistenz. Das Befestigungssystem ist Ihr Premium-Partner für die Eingliederung von Silikatkeramik- und Composite-Veneers mit geringer Schichtstärke. Die breite Farbpalette bietet Ihnen alle ästhetischen Möglichkeiten. Exakt abgestimmte Try-in Pasten zeigen verlässlich, wie es nachher aussieht. Ganz einfach.

Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten für sich und Ihre Patienten. **Mit Vitique von DMG.**

Veneerbefestigung mit Mehrwert.

Zwei Kits, ein System.

Das Vitique Produktsystem umfasst zwei Kits:
Das Cementation Kit mit Zementen und Try-in Pasten.

Und das ergänzende Vitique Accessory Kit mit Ätzzgel, Silan und Bond.

Alles in bester Qualität und sorgfältig aufeinander abgestimmt. Die Zemente und Try-in Pasten sind jeweils auch einzeln als Refill erhältlich.

Flexible Farbwahl.

Mit Vitique steht Ihnen die ganze Farbpalette zur Verfügung, um jedem Ihrer Patienten ästhetisch gerecht zu werden.

Das Veneer Cementation Kit enthält standardmäßig drei Farben: B1, A2,5 und Transparent.

Mit den Nachfüllpackungen können Sie ganz nach Wunsch fünf weitere Farben ergänzen: A1, A4, Bleach Light, Pink und Weiß.

Präzise Vorschau.

Vorher wissen, wie es nachher aussieht: Vitique bietet für jede einzelne Farbe entsprechende Try-in Pasten. Auf die Farbabstimmung dieser Pasten wurde ganz besonderes Augenmerk gelegt.

Das Ergebnis:

Die exakte Farbübereinstimmung von Vitique Try-in und Zement erlaubt eine verlässliche Vorschau auf das Endergebnis.



Perfekte Farbübereinstimmung



Das Zentrum der Farbkörper wurde jeweils mit der entsprechenden Vitique Try-in Paste befüllt.

Pluspunkte für einfaches Handling.

Gutes Aussehen leicht gemacht.

Das Vitique Produktsystem punktet mit gut durchdachten Details, die für eine denkbar komfortable Anwendung sorgen.

Praktischer Veneer Tip.

Um die Eingliederung von Veneers zu erleichtern, wurde ein spezieller Veneer Tip entwickelt.

Mit ihm kann das Material in einem flachen Streifen gleichmäßig, bequem und schnell aufgetragen werden.

Überschüsse leicht entfernen.

Die DMG-patentierte Monomerformel verhindert ein Wegfließen ebenso wie unnötiges Verschmieren auf der Keramik.

Dank perfekt eingestellter Gelphase lassen sich Überschüsse leicht in einem Stück entfernen.

Einfach, sauber, schnell.

Perfekte Haftung dank passendem Bond.


Bei dem im Accessory Kit enthaltenen Bond handelt es sich um DMGs Markenprodukt TECO. Das anwenderfreundliche Bondingsystem ist ideal auf Vitique abgestimmt und überzeugt mit exzellenten Haftwerten.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die anwenderfreundliche Total-Etch-Technik. Damit lässt sich nach dem Ätzen auf feuchten Flächen arbeiten und somit eine Dentin-Übertrocknung vermeiden.



Links: Applikation des Materials mit Veneer Tip.
Rechts: Ausgehärteter Überschuss, leicht entfernbar.

Verbundfestigkeit (SBS) verschiedener Adhäsivsysteme auf geätztem Schmelz

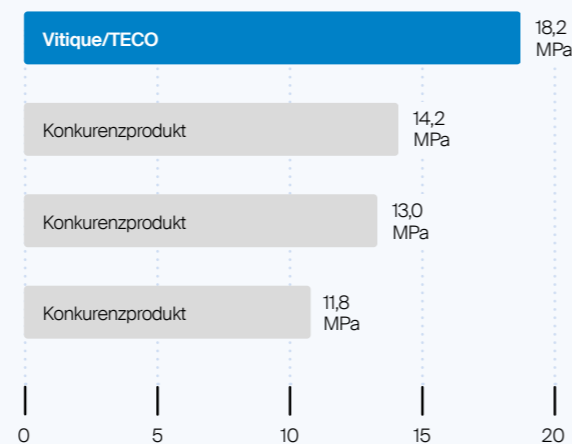

Quelle: Interne Messung DMG, Hamburg 2013

Vitique. Permanente Zemente

Produktübersicht

Vitique

Cementation System: REF 213080

- 3 Spritzen à 6 g Esthetic Resin Cement
Farbe A2.5, B1, Transparent
- 3 Spritzen à 3,9 g Try-in Paste
Farbe A2.5, B1, Transparent
- 1 Spritze à 2 ml Etching Gel
- 1 Flasche à 5 ml TECO
- 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Activator

Cementation Kit: REF 213081

- 3 Spritzen à 6 g Esthetic Resin Cement
Farbe A2.5, B1, Transparent
- 3 Spritzen à 3,9 g Try-in Paste
Farbe A2.5, B1, Transparent
- 50 Veneer Tips

Accessory Kit: REF 213082

- 1 Spritze à 2 ml Etching Gel
- 1 Flasche à 5 ml TECO
- 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Activator
- Zubehör



Vitique

Refill:

- 1 Spritze à 6 g Esthetic Resin Cement
- 10 Veneer Tips

Farbe A1	REF 213038
Farbe A2.5	REF 213039
Farbe A4	REF 213040
Farbe B1	REF 213041
Farbe Bleach Light	REF 213042
Farbe Transparent	REF 213043
Farbe White	REF 213044

- 1 Spritze à 3,9 g Try-in Paste
- 10 Veneer Tips

Farbe A1	REF 213040
Farbe A2.5	REF 213049
Farbe A4	REF 213050
Farbe B1	REF 213051
Farbe Bleach Light	REF 213052
Farbe Transparent	REF 213053
Farbe White	REF 213054
Farbe Pink	REF 213055



Vitique Silane

Packung: REF 213118

- 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Activator
- Zubehör



Mehr über
Vitique

Zusammen
ein Lächeln voraus



DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental

000510/2024-11

